

E&G Medical Systems
Gerencia Técnica
servicio@eygsa.cl / www.eygsa.cl / +56 2 2653 7362

Información de la Tarea 3824

Creada el: 31/07/26 - 19:01

Datos de la Tarea

Trabajador
Mauricio Abreu
Fecha y Hora Programada
31/07/26 - 19:01
Duración Estimada
120 minutos
Prioridad
Alta
Tipo de Tarea
CORRECTIVA PROGRAMADA
Descripción
Cambio de Target Drive

Datos del Cliente

Cliente
HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
Sucursal
Rut
61.606.500-9
Email del Contacto
jose.solisc@redsalud.gob.cl, gabriel.veillon@redsalud.gob.cl, constanza.hormazabalg@redsalud.gob.cl, andres.vasqueza@redsalud.gob.cl, isabella.liedtke@redsalud.gob.cl, paula.bravo@redsalud.gob.cl, maria.poncerettyc@redsalud.gob.cl, datos@eygsa.cl
Nombre del Contacto
Servicio de Radioterapia
Telefono del Contacto
Dirección
Hontaneda 2560, Valparaíso
Piso
-1
Oficina
Referencia

Equipos a Revisar

ID	Nombre	Marca y Modelo	Número de Serie	Comentario	Formulario	Piezas
Linac-154325	VERSA HD	ELEKTA - VERSA HD	154325			0

Formulario: INFORME ASISTENCIA TECNICA v8.7 (con ticket)

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN	
NUMERO DE TICKET	10037
TRABAJO REALIZADO	Cambio de Target Drive
HORA DE INICIO DEL TRABAJO	30/07/2026 06:02
HORA DE TERMINO DEL TRABAJO	31/07/2026 23:13
NOMBRE DEL INGENIERO ADICIONAL	CARLOS CARRASQUEL,MAURICIO ABREU
DESPERFECTO AFECTA A	DOSIMETRIA DEL HAZ,CABEZAL MULTIHOJA

COMENTE EL DESPERFECTO	Se realizó roluotura de vacío, reemplazo del Target Drive y recuoeracion de vacío. Todo esto en la búsqueda de solucionar diversos problemas que presenta el equipo, entre los más destacados Diferencia en planicidad y simetría, error en la Ubicación de ciertas laminas determinado por los físicos mediante el Picket Fence, entre otros errores de bajo impacto pero que generan problemas para ciertos tratamientos. El problemas se encuentra al rededor de la osilacion del servo 2R que el equipo de forma automática no logra estabilizar, está y otros ajustes anteriores se han realizado con el objetivo de dar fin ha este problema sin éxito por el momento. Por recomendación del fabricante Elekta, se debe realizar una maniobra mayor con el apoyo en tiempo real de personal de Elekta Para lograr un ajuste del central del haz igual al realizado en fabrica ya que de manera atípica este se desplazo de su lugar de origen por defecto.
OBSERVACIONES DEL TRABAJO	Se recomendara y agendará una próxima visita donde se necesita la participación de personal de Elekta, EyG y físicos responsables del equipo.

REPUESTOS	
NOMBRE DEL REPUESTO O INSUMO UTILIZADO	FRU KIT FLIGHT TUBE DRIVE
NÚMERO DE PARTE (Leer código de barra del repuesto)	1538261
CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	1
UBICACIÓN DE ORIGEN DE REPUESTO	Pañol E&G
FOTO DEL REPUESTO UTILIZADO	 Descargar


ENTREGA	
INTERVENCION FINALIZADA	Si
FECHA Y HORA DE ENTREGA	31/07/2026 23:15
HABILITADO PARA USO CLINICO	Si
OBSERVACIONES	
EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO LUEGO DE LA INTERVENCIÓN	Si

AFECTACIÓN DE DOSIMETRÍA DEL HAZ	
¿INTERVENCIÓN AFECTA DOSIMETRÍA DEL HAZ?	Si


CONTROLES DE CALIDAD RECOMENDADOS	
CONTROL DE CALIDAD	DIARIO,DOSIMETRICO

Firmas de la Tarea:

Firma del Cliente
Recibido Conforme.



Firma del Trabajador
Entregado Conforme.

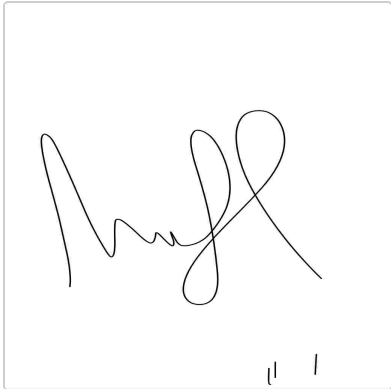

Mauricio Abreu
259382602